


Softform

Premier



Trykkfordelende skummadrass

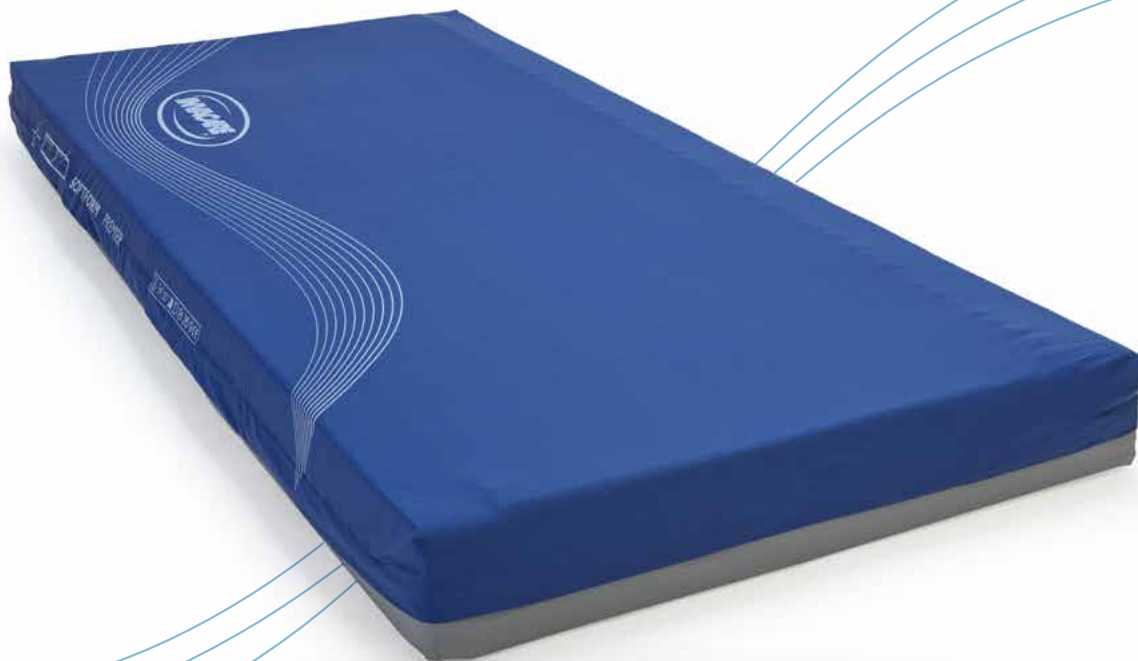

Yes, you can.®



Softform Premier FS
(med helsveiset trekk)

Invacare **Softform Premier** er en antidecubitusmadrass som er utviklet for å oppnå god trykkfordeling og komfort. Under utformingen av **Softform Premier** er det lagt spesielt vekt på trykkreduisering ved hælene. En praktisk og holdbar madrass som tilpasser seg godt sengens innstillinger.

Forebygging av trykksår

- ▶ Invacare Softform Premier er en todelt madrass som består av et u-formet underlag og en skumkjerne som er skåret i ulike store firkanter for tilpasset trykkfordeling. Den nøkkelhullsformede skjæringen av firkantene gir økt effekt med tanke på reduksjon av skyvkreftene.

Helsveiset trekk -SRT

- ▶ Softform Premier finnes også i en utgave med helsveiset trekk spesielt utviklet for miljøer som stiller høye krav til kvalitet, som sykehus eller helsehus (Softform Premier FS). Trekket er laget av høyresistent polyuretan og sveisede sømmer i stedet for glidelås, som gir en ekstra beskyttelse og minimerer risikoen for at væske skal trenge inn. Trekket kan fåes med Crib5 eller Crib7.


Leveres med inkontinenstrekk

- ▶ Trekket er elastisk og fremstilt av vannavstøtende polyuretan. Det har sveisede sømmer, og glidelåsen er dekket med en dryppkant. Trekket beskytter madrassen og forlenger dens levetid.

Standard trekk tilfredsstiller Crib 5 for brannhemming.



Egenskaper ▾

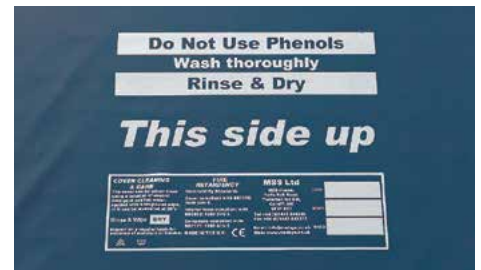

Formet overflate ved hælene

- ▶ Skummet i fotenden er formet for å avlaste brukerens hæler, ettersom det ofte er høy risiko for å få trykksår her.

Praktiske bærehåndtak

- ▶ To bærehåndtak gjør madrassen enkel å transportere.

Trekk og skum er merket med «This side up»

- ▶ Madrassen krever ikke vending eller rotering. Dette gjør madrassen enkel å håndtere for helsepersonell.

Tekniske data ▾



Bredde:
830, 850, 880, 900,
1050, 1200 mm



Lengde:
2000 mm



Høyde:
152 mm



Vekt:
13 kg



Maks. brukervekt:
240 kg



Vask: 95°

Madrassen oppfyller følgende standarder:

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Innvendig skum: BS 5852: 1990 Crib Source 5;
Trekk: BS7175: 1989 Crib Source 5.



Baltisk blå

Art. nr.	Skum- og luftmadrass	Madrassmål cm	Materiale
1486846	SOFTFORM PREMIER	83X200X14 cm	Inkotrekk
1486847	SOFTFORM PREMIER	85x200X14 cm	Inkotrekk
1486915	SOFTFORM PREMIER	88X200X14 cm	Inkotrekk
1486848	SOFTFORM PREMIER	90X200X14 cm	Inkotrekk
1629058	SOFTFORM PREMIER	105x200x15 cm	Inkotrekk
1632289	SOFTFORM PREMIER	120x200x15 cm	Inkotrekk

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®